

РАНЕВОЙ ПРОТЕКТОР/РОНОРАСШИРИТЕЛЬ СТЕРИЛЬНЫЙ модель HRA (с регулируемой длиной рукава)

Компания «ФАРМЛИНК» предлагает медицинским учреждениям и клиникам раневые протекторы (ранорасширители) производства компании Haida со склада в Киеве. Вся продукция высочайшего качества и поставляется в стерильной упаковке.



Описание Продукта

Устройство для защиты операционной раны - модели HRA (с регулируемой длиной рукава), именуемое часто протектором или ретрактором – предназначено для расширения поля доступа, защиты раны от травм и снижения риска занесения инфекции в рану, при проведении эндоскопических и открытых хирургических операций.

Ретракторы модели HRA не только обеспечивают обзор дна операционной раны, но и прекрасно увеличивают освещенность операционного поля, позволяют больше маневрировать инструментами и камерой во время операции. Такие ретракторы модели HRA применяются: для разведения краев раны брюшной стенки, для разведения краев раны грудной стенки (в торокальной хирургии снижается риск повреждения межреберных нервов и уменьшается время пребывания в стационаре), для оттеснения края печени, для оттеснения почки.

Область применения:

- **Общая хирургия** (паховая грыжа, тиреоидэктомия, аппендэктомия, спленэктомия, резекция поджелудочной железы)
- **Хирургия толстой и прямой кишки** (лапараскопическая колэктомия, открытая колэктомия)
- **Бариатрия** (лапараскопическое шунтирование желудка, открытое шунтирование желудка)
- **Акушерство и Гинекология** (перевязка маточных труб, кесарево сечение, двусторонняя сальпингоофорэктомия, лапараскопическая гистэректомия, миnilапаратомия, тотальная абдоминальная гистэректомия)

- **Торокальная хирургия** (торакоскопические операции, кардио-торакальные операции, торактомия)
- **Травматология и ортопедия** (артропластика плеча, эндопротезирование коленного сустава)

Особенности изделия :


- Минимизирует высыхание краев операционной раны
- Обеспечивает равномерную бережную ретракцию раны и позволяет защитить разрез от кровотечения и инфицирования
- Значительно снижает риск контоминации краев раны
- Обеспечивает беспрепятственную обзорность при проведении манипуляций
- Снижает послеоперационную боль связанную с воздействием на рану и значительно ускоряет время восстановления пациента
- Сокращает время оперативного вмешательства
- Прочный материал рукава обеспечивает надежную защиту раны при проведении операции
- Материал протекторов – термопластичный полиуретан и силикон
- Внутреннее гибкое кольцо синего цвета позволяет с необычайной легкостью погрязать и извлекать данное изделие из раны

Модельный ряд :

Модель	Технические характеристики	Внутренний диаметр имплантного кольца (мм)	Наружный диаметр имплантного кольца (мм)	Диаметр канала (мм)	Длина канала (мм)
		D1	D2	D3	H
HRA	60/70-60/150	70	60	60	150
	80/90-80/150	90	80	80	150
	120/130-120/250	130	120	120	250
	150/160-150/250	160	150	150	250
	180/190-180/250	190	180	180	250
	220/230-220/250	230	220	220	250
	270/280-270/250	280	270	270	250
	320/330-320/250	330	320	320	250

Схематическая инструкция по установке изделия :



1. Согнуть и поместить гибкое кольцо синего цвета в полость операционного разреза

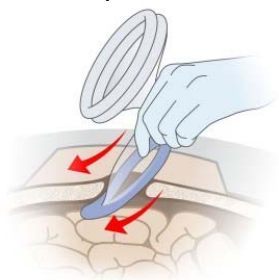

2. Выворачивая кольцо белого цвета во внутрь создать операционное поле



3. Убедиться в правильной постановке изделия в ране

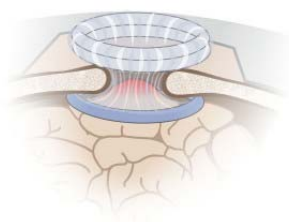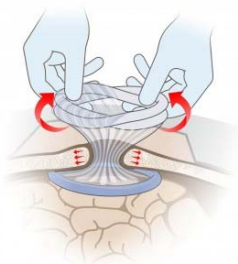

БЕЗОПАСНЫЙ УХОД И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА С ПРОДУКЦИЕЙ КОМПАНИИ «ФАРМЛИНК»

БОЛЬШЕ НА НАШЕМ САЙТЕ www.haida.farmlink.ua